

小型低価格、振とう器などの設置可能

Incubators with Direct Heat

恒温器(インキュベータ)

IC101/101W(観測窓付き)

3年間保証
弊社ホームページ上でお客様登録いただくと通常1年の無償保証が3年間となります。

機種一覧
209頁

- エアジャケット
- 過電流ブレーカ
- 自己診断機能

温度制御範囲 (室温+5)~60℃ 温度分布精度 ±1.0℃(101型)/±1.5℃(101W型) (at 37℃) 内容積 37ℓ

- ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
- 操作パネルが上部に設置されているため、操作しやすい設計です。
- 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
- IC101W型には、視認性のよい大型の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。

(注) 発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。



37ℓ IC101型 37ℓ IC101W型

仕様


| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| 商品コード | 211130 | 211139 |
| 型式 | IC101 | IC101W |
| 方式 | 内槽壁面加温 自然対流方式 | |
| 性能 | 温度制御範囲 | (室温+5)~60℃ |
| | 温度調節精度 | ±0.5℃ (at 37℃) |
| | 温度分布精度 | ±1.0℃ (at 37℃) |
| | 最高温度到達時間 | 約40分 |
| 構成 | 内槽 | ステンレス鋼 |
| | 扉 | 薄型一体扉、マグネット固定方式 |
| コントロール | 観測窓 | — |
| | ヒータ | ヒータ 100W |
| | サービスコンセント | — |
| | 接地付き2A | — |
| オプション | 温度制御方式 | P.I.D.制御 |
| | 運転機能 | 定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート |
| | タイマ | 0分~999時間50分 |
| | タイマ分解能 | 1分 |
| 安全装置 | 温度センサ | K熱電対 |
| | 自己診断機能(温度センサ異常、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 | — |
| 規格 | 内寸法/内容積 | 幅350×奥行300×高さ360mm/約37ℓ |
| | 外寸法 ^{#2} | 幅410×奥行380×高さ520mm |
| 価格 | 電源(50/60Hz) 定格電流 | AC100V 1.1A (10A) |
| | 重さ | 約16kg |
| 付属品 | 棚板2枚・棚受2本 | — |
| 価格 | ¥77,000 | ¥96,000 |

(注) 上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の()はブレーカ容量および電源設備容量です。
※1.条件温湿度23℃±5℃、65%RH±20%(無負荷) ※2.外寸法は突起部を含みません。 ※3.サービスコンセント最大2A使用時。

オプション

| No. | 品名 | 商品コード | 価格 |
|-----|-------------------------|--------|---------|
| ① | スライドレール付振とう器設置台(IC101W) | 211191 | ¥22,400 |
| ② | 棚板(1枚・棚受2本付き) | 211192 | ¥14,400 |
| ③ | 重ね金具 | 211855 | ¥5,600 |
| ④ | 内扉 | 211200 | ¥12,000 |
| ⑤ | 防震マットラボピタ | 296902 | ¥3,300 |

(注) 上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

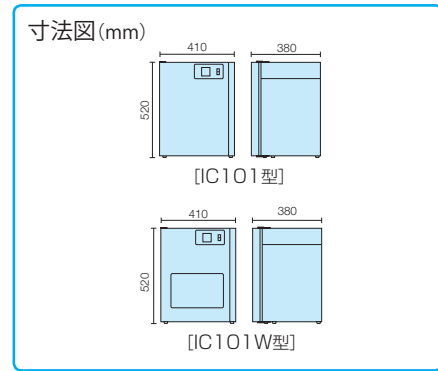

植物の育成に最適なグロダンロックウール培地仕様

Rockwool

ロックウール培地

Slab/Plug/Block

グロダンロックウール培地は、土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。使用目的に合わせてさまざまな製品をそろえています。価格：お問い合わせください。

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>●スラブ</p> <p>グロトップエキスパート グロトップマスター クラシック MY</p>  <p>クラシックMY</p> | <p>●プラグ</p> <p>キエムプラグ マルチブロック タコブロック</p>  <p>キエムプラグ</p> | <p>●ブロック</p> <p>ミニブロック デルタ</p>  <p>デルタ</p> | <p>●その他</p> <p>粒状綿 グローキューブ</p>  <p>by grodan</p> |
|---|--|--|---|

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。